

Внутривенное (в/в) введение лекарственного препарата:

МИНИ-пакет с прикрепленным флаконом
с использованием регулятора скорости инфузии



Данная информация не предназначена для использования вместо профессиональных рекомендаций.

Поэтому выполняйте рекомендации своего врача, медсестры или фармацевта.

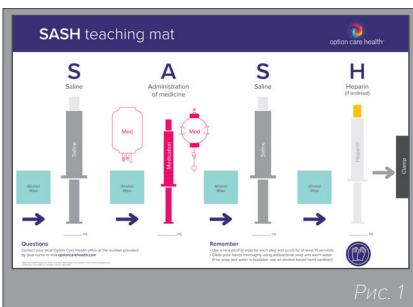


Рис. 1

Перед применением

- Если лекарственный препарат следует хранить в холодильнике, посмотрите на этикетке, когда нужно доставать лекарственный препарат из холодильника.
- НИКОГДА** не ускоряйте процесс размораживания лекарственных препаратов, подогревая их различными способами, в том числе в микроволновой печи.
- Подготовьте чистое рабочее место.
- Тщательно вымойте руки теплой водой и мылом в течение **20 СЕКУНД**
(если мыло и вода недоступны, используйте антисептик для рук на спиртовой основе).
- Вытрите руки насухо чистым полотенцем.

1 | Подготовьте необходимые принадлежности и коврик SASH в соответствии с указаниями:

- Коврик SASH (см. рис. 1).
- Пакет с лекарственным препаратом для в/в введения.
- Инфузционную систему (может использоваться в течение 24 часов).
- Инфузционную стойку.
- (2) промывочных шприца с солевым раствором.
- (1) промывочный шприц с гепарином (если назначено).
- Спиртовые салфетки.
- Контейнер для острых предметов и (или) контейнер для мусора.

2 | Осмотрите пакет с лекарственным препаратом

Внимательно прочитайте этикетку на пакете (см. рис. 2) и проверьте правильно ли указаны:

- Имя и фамилия пациента.
- Название лекарственного препарата.
- Объем/количество лекарственного препарата.
- Инструкции по хранению.
- Срок годности лекарственного препарата.



Рис. 2

Изображение приводится только в демонстрационных целях. Выполняйте инструкции на этикетке **ВАШЕГО** пакета с лекарственным препаратом.


Пакет с лекарственным препаратом не должен протекать, в содержимом не должно быть плавающих частиц, цвет содержимого не должен быть изменен.
В случае выявления проблем с пакетом с лекарственным препаратом или неправильных сведений на этикетке позовите своей медсестре или фармацевту.

- Ваша группа медицинских специалистов из Option Care Health готова предоставить помощь по телефону в режиме 24/7/365.



option care health®

Внутривенное (в/в) введение лекарственного препарата: мини-пакет с прикрепленным флаконом с использованием регулятора скорости инфузии

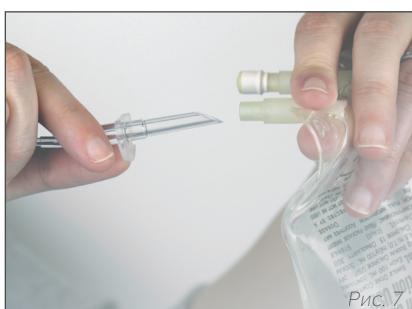


3 | Подготовьте лекарственный препарат для в/в введения

- A. Чтобы сбросить давление во флаконе, отогните его вверх, а затем вниз у голубого колпачка флакона (см. рис. 3).
- B. Держите пакет с раствором так, чтобы флакон был перевернут вверх дном.
- C. Выдавите раствор во флакон, пока он не будет заполнен наполовину.
- D. Осторожно встряхните раствор, чтобы препарат растворился.
- E. Держите пакет с раствором так, чтобы флакон был перевернут вверх дном (см. рис. 4).
- F. Сожмите пакет, чтобы воздух вышел во флакон.
- G. Отпустите, чтобы растворенный препарат потек из флакона.

Повторяйте эти действия до тех пор, пока флакон полностью не опустеет (т. е. до тех пор, пока в нем не останется лекарственного препарата и раствора). Убедитесь в том, что препарат полностью растворился.
НЕ снимайте флакон с препаратом.

4 | Подготовьте инфузционную систему

- A. Извлеките инфузционную систему из упаковки.
- B. Закройте зажим на трубке инфузционной системы.
- C. Положите пакет с лекарственным препаратом на чистую ровную поверхность.
- D. Снимите защитный колпачок с пакета с лекарственным препаратом (см. рис. 5).
- E. Снимите колпачок с иглы-шипа инфузионной системы (см. рис. 6). **НЕ** прикасайтесь к кончику.
- F. Введите иглу-шип в пакет, проталкивая ее закручивающими движениями в порт пакета (см. рис. 7). Убедитесь, что игла достигла лекарственного препарата и не проткнула пакет (см. рис. 8).
- G. Поверните регулятор на трубке инфузционной системы в положение 'OPEN' («**ОТКРЫТО**») (см. рис. 9).
- H. Медленно откройте зажим, заполняя систему лекарственным препаратом.
- I. Закройте зажим, когда лекарственный препарат достигнет конца трубки системы.
- J. С помощью регулятора установите необходимую скорость инфузии, указанную на этикетке лекарственного препарата.

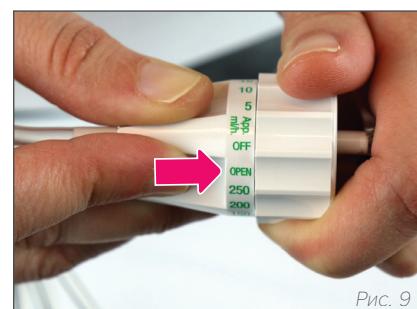

Внутривенное (в/в) введение лекарственного препарата: мини-пакет с прикрепленным флаконом с использованием регулятора скорости инфузии



Рис. 10



Рис. 11



Рис. 12

5 | Промойте инфузционную линию солевым раствором

- A. Протрите безыгольный коннектор на в/в катетере спиртовой салфеткой в течение не менее **15 СЕКУНД** и дайте ему высохнуть на воздухе (см. рис. 10).
- B. Надавите на шток поршня промывочного шприца с солевым раствором, чтобы разорвать пломбу.
- C. Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с солевым раствором.
НЕ прикасайтесь к кончику шприца после снятия колпачка.

Выбросите промывочный шприц с солевым раствором, если стерильный кончик без колпачка прикоснется к каким-либо неочищенным поверхностям.

- D. Удерживая шприц в вертикальном положении, слегка надавите на шток поршня, чтобы выпустить воздух из шприца.
- E. Подсоедините промывочный шприц с солевым раствором к безыгольному коннектору на в/в катетере путем надавливания и закручивания по часовой стрелке до полного соединения друг с другом (см. рис. 11).
- F. Откройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузационной линии.
- G. Промойте в/в катетер, используя технику «надавливание/пауза». Для этого введите небольшое количество жидкости, сделайте паузу на **2–3 СЕКУНДЫ** и повторяйте эту последовательность действий до тех пор, пока не введете назначенное количество.

НЕ пытайтесь промывать катетер в случае наличия сопротивления; позвоните медсестре или фармацевту.

- H. Закройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузационной линии.
- I. После использования отсоедините и выбросите шприц для промывки солевым раствором в контейнер для мусора.

6 | Введение лекарственного препарата

- A. Протрите безыгольный коннектор на в/в катетере спиртовой салфеткой в течение не менее **15 СЕКУНД** и дайте ему высохнуть на воздухе (см. рис. 10).
- B. Снимите защитный колпачок с инфузционной системы.
- C. Надежно присоедините инфузционную систему с лекарственным препаратом к безыгольному коннектору на в/в катетере. Делайте это путем надавливания и закручивания по часовой стрелке до полного соединения (см. рис. 12).
- D. Откройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузационной линии.
- E. Откройте зажим на инфузционной системе с лекарственным препаратом.
- F. После вливания назначенного количества закройте зажим на инфузционной системе.
- G. Закройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузационной линии.

Внутривенное (в/в) введение лекарственного препарата: мини-пакет с прикрепленным флаконом с использованием регулятора скорости инфузии

6 | Введение лекарственного препарата *Продолжение...*

- H.** Отсоедините инфузционную систему от катетера.
- I.** Выбросите все использованное оборудование в контейнер для мусора.

Если систему необходимо использовать еще раз в течение 24 часов, закройте открытый кончик системы предоставленным стерильным колпачком.

7 | Промойте инфузционную линию солевым раствором

- A.** Протрите безыгольный коннектор на в/в катетере спиртовой салфеткой в течение не менее **15 СЕКУНД** и дайте ему высохнуть на воздухе (см. рис. 10).
- B.** Надавите на шток поршня промывочного шприца с солевым раствором, чтобы разорвать пломбу.
- C.** Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с солевым раствором.
НЕ прикасайтесь к кончику шприца после снятия колпачка.
- D.** Удерживая шприц в вертикальном положении, слегка надавите на шток поршня, чтобы выпустить воздух из шприца.
- E.** Подсоедините промывочный шприц с солевым раствором к безыгольному коннектору на в/в катетере путем надавливания и закручивания по часовой стрелке до полного соединения друг с другом (см. рис. 11).
- F.** Откройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузционной линии.
- G.** Промойте в/в катетер, используя технику «надавливание/пауза». Для этого введите небольшое количество жидкости, сделайте паузу на **2-3 СЕКУНДЫ** и повторяйте эту последовательность действий до тех пор, пока не введете назначенное количество.

НЕ пытайтесь промывать катетер в случае наличия сопротивления; позвоните медсестре или фармацевту.

- H.** Закройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузционной линии.
- I.** После использования отсоедините и выбросите шприц для промывки солевым раствором в контейнер для мусора.

Внутривенное (в/в) введение лекарственного препарата: мини-пакет с прикрепленным флаконом с использованием регулятора скорости инфузии

8 | Промойте инфузционную линию гепарином (если назначено)

- A.** Протрите безыгольный коннектор на в/в катетере спиртовой салфеткой в течение не менее **15 СЕКУНД** и дайте ему высохнуть на воздухе (см. рис. 10).
- B.** Надавите на шток поршня промывочного шприца с гепарином, чтобы разорвать пломбу.
- C.** Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с гепарином.
НЕ прикасайтесь к кончику шприца после снятия колпачка.

Выбросите промывочный шприц с гепарином, если стерильный кончик без колпачка прикоснется к каким-либо неочищенным поверхностям.

- D.** Удерживая шприц в вертикальном положении, слегка надавите на шток поршня, чтобы выпустить воздух из шприца.
- E.** Подсоедините промывочный шприц с гепарином к безыгольному коннектору путем надавливания и закручивания по часовой стрелке до полного соединения друг с другом (см. рис. 11).
- F.** Откройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузационной линии.
- G.** Промойте в/в катетер, используя технику «надавливание/пауза». Для этого введите небольшое количество жидкости, сделайте паузу на **2–3 СЕКУНДЫ** и повторяйте эту последовательность действий до тех пор, пока не введете назначенное количество.

НЕ пытайтесь промывать катетер в случае наличия сопротивления; позвоните медсестре или фармацевту.

- H.** Закройте зажим на в/в катетере и (или) удлинительной инфузационной линии.
- I.** После использования отсоедините и выбросите шприц для промывки гепарином в контейнер для мусора.

Со всеми вопросами и проблемами обращайтесь к медсестре или врачу

Ваша группа медицинских специалистов из Option Care Health готова предоставить помочь по телефону в режиме 24/7/365.



Чтобы посмотреть видеоИнструкции или ознакомиться с дополнительными учебно-просветительскими ресурсами, посетите веб-сайт optioncarehealth.com/education.

Отделения Option Care Health аккредитованы Комиссией по аккредитации медицинских учреждений (Accreditation Commission for Health Care, ACHO). Номера организаций по медицинскому обслуживанию на дому (Home Health Agencies, HHA) можно посмотреть на веб-сайте optioncarehealth.com.

© Option Care Health, Inc., 2022 г. Все права защищены. 20OCH11012-0422